

повторно изучают морфологию колоний, обращая внимание на появление черного пигмента, и производят отсев в жидкие питательные среды материал из тех колоний, которые отсутствовали при первом учете чашек.

Идентификация грамотрицательных бактерий в зависимости от целей может быть ориентировочной (определение рода) или финальной (определение вида). Ориентировочная идентификация проводится по следующим характеристикам: рост в присутствии желчи (диски 5 мг), бриллиантового зеленого (диски 100 мкг), канамицина (диски 1000 мкг), ферментация глюкозы, наличие черного пигмента.

Материалы для анаэробного культивирования

LE001

Система для
анаэробного
культивирования

HiAnaerobic™

System-10

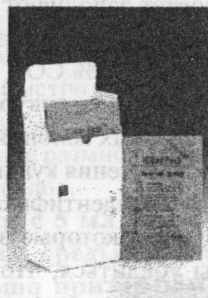
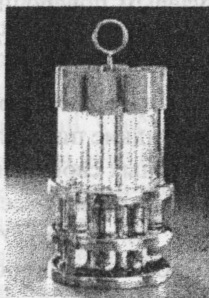
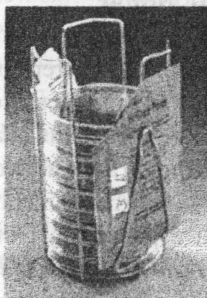


Рис. 3. Материалы для анаэробного культивирования